

***Harpo***  
seecret





## Představení

Gratulujeme k zakoupení vašeho zařízení proti stárnutí Hapro Seecret®! Společnost VDL Hapro B.V. vyrábí vysoce kvalitní produkty s pečlivostí a řemeslným zpracováním. Zařízení proti stárnutí Hapro Seecret® splňují stejné vysoké standardy. Tato produktová řada byla vyvinuta a sestavena v souladu s nejpřísnějšími platnými normami a obsahuje pečlivě vybrané, vysoce kvalitní komponenty. Na základě vědecky prokázaných principů bylo zjištěno, že Hapro Seecret® revitalizuje a zlepšuje zdravý vzhled vaší pokožky relaxačním způsobem.

Než začnete zařízení používat, doporučuje se nejprve pečlivě přečíst tento návod a příloženou brožuru. Dokumenty obsahují mimo jiné rozsáhlé informace o konceptu proti stárnutí Seecret®, jeho vlivu na pokožku a používání zařízení. S těmito informacemi si budete moci užívat roky potěšení ze svého zařízení proti stárnutí Hapro Seecret®.

## Důležité

- **Žádáme vás, abyste při otevření balení vždy zkontrolovali výrobek na vnější vady, nedostatky nebo poškození při přepravě. Pokud by bohužel vykazoval vady nebo nedostatky, kontaktujte svého prodejce.**
- **Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.**
- **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.**
- **Voda a elektrina jsou nebezpečnou kombinací! Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti sprchy či bazénu).**
- **Pokud jste právě plavali nebo se sprchovali, důkladně se osušte před použitím zařízení.**
- **Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.**
- **Zařízení nesmějí používat děti ani osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, či osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo neobdržely pokyny k použití.**
- **Po použití vždy odpojte zařízení ze zásuvky.**
- **Nechte zařízení vychladnout přibližně 15 minut, než jej uložíte.**
- **Během používání zajistěte, aby zůstaly ventilační otvory zařízení otevřené.**
- **Barvy mohou vyblednout vlivem slunečního záření. Stejný efekt může nastat při použití tohoto zařízení.**
- **Chraňte si oči během používání pomocí poskytnutých ochranných brýlí. Kontaktní čočky a sluneční brýle nejsou náhradou za ochranné brýle.**
- **Nepoužívejte zařízení, pokud je časovač vadný.**

## Používání přístroje

### 1 Umístěte zařízení na pevný, rovný a stabilní povrch.

Zařízení může být umístěno ve dvou polohách: ve vzpřímené a nakloněné poloze. (Obr. 1)

### 2 Úplně odviňte napájecí kabel.

### 3 Zapojte kabel do zásuvky.

### 4 Pro stanovení vhodné délky sezení se podívejte do tabulky.


**5 Nasad'te si poskytnuté ochranné brýle.**

**6 Postavte se před zařízením.**

**7 Zkontrolujte vzdálenost mezi vaším tělem a zařízením.**

- Vzdálenost mezi vaším obličejem a lampami by měla být 10m. Obr. 3

**8 Zapněte zařízení nastavením časovače na požadovanou délku sezení (Obr. 2).**

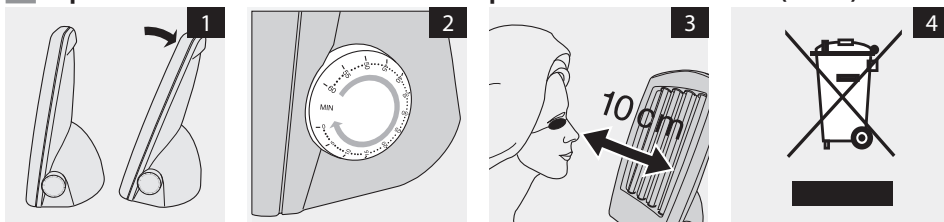

- Po uplynutí nastaveného času časovač automaticky vypne zařízení.

**9 Zařízení vždy odpojte, pokud ho nepoužíváte.**

### Sezení

Stejně jako u všech bezpečných a bezbolestných metod stimulace pleti, jedna sezení okamžitě nezlepší vzhled pokožky. Stárnutí pleti je proces, který probíhá po mnoho let, takže není překvapením, že jej nelze zvrátit pouze jedním sezením trvajícím několik minut. K dosažení požadovaných účinků a viditelných výsledků je zapotřebí série omlazovacích sezení. Doporučujeme si dopřát 2-3 omlazovací sezení týdně po dobu 10 až 12 týdnů. Mějte na paměti, že před zahájením dalšího sezení je třeba dodržet 48hodinovou přestávku.

Výsledky budou měřitelné po přibližně jednom měsíci a viditelné výsledky zaznamenáte po přibližně třech měsících. To se však liší od osoby k osobě a výrazně závisí na typu pleti. Po třech měsících lze předpokládat, že stav vaší pleti dosáhl úrovně, při které lze frekvenci sezení snížit. Poté můžete přejít na „udržovací sezení“ jednou za dva týdny.

Délka sezení	Počet sezení za týden	Počet týdnů
30 minut	2-3	10-12

- **Kúra ošetření během nepřetržitého období 10 až 12 týdnů**
- **2 až 3 sezení týdně**
- **48 hodinová přestávka mezi sezeními**
- **Udržovací sezení jednou za dva týdny po dokončení kúry ošetření**

Jak je známo, z vědeckého hlediska není třeba omezovat počet ošetření s kolagenovým světlem. Na základě pečlivého zkoumání a praktických testů však společnost VDL Hapro B.V. stanovila tato doporučení pro používání, aby vám pomohla dosáhnout co nejlepších výsledků.

### Ochranné brýle

Ochranné brýle by měly být používány pouze se zařízením Hapro Seecret. Nesmějí být používány k jiným účelům.

Ochranné brýle splňují ochrannou třídu II podle směrnice 89/686/EEC.

## Čištění

**Vždy odpojte zařízení ze zásuvky a nechte ho před čištěním vychladnout.**

- **Můžete vyčistit vnější část zařízení vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že se voda nedostane dovnitř zařízení.**

**Nikdy nepoužívejte drsné houbičky a abrazivní kapaliny, jako jsou čisticí prostředky, benzín nebo aceton, k čištění zařízení.**

- **Očistěte ochranné brýle vlhkým hadříkem**

## Výměna

### Lampa

Světlo emitované lampami se časem stane méně jasným (např. po několika letech při normálním používání). Když k tomu dojde, zaznamenáte pokles výkonu zařízení. Tento problém můžete vyřešit nastavením mírně delší doby sezení nebo výměnou lamp.

**Vždy nechte lampy a startéry vyměnit autorizovaným servisním střediskem Hapro. Pouze oni mají potřebné znalosti a dovednosti pro tuto práci a originální náhradní díly pro vaše zařízení..**

### Ochranné brýle

Další nebo náhradní brýle si můžete objednat u svého prodejce.

## Životní prostředí

- **Lampy obsahují látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Při likvidaci lamp je nevyhazujte s běžným domovním odpadem, ale odložte je na oficiálním sběrném místě.**
- **Na konci životnosti zařízení jej nevyhazujte s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí. (Obr. 4)**

## Záruka a servis

Všechny vady způsobené materiálovými nebo výrobními chybami, které se vyskytnou během záruční doby, budou opraveny zdarma na základě předložení originálního prodejního dokladu. Záruční doba je 24 měsíců. Pro záruční dotazy se prosím obraťte na svého prodejce. Váš nový Hapro Seecret C25 je určen pro domácí použití a nikoli pro komerční účely. Poškození způsobené komerčním použitím, stejně jako trubky, startéry a ochranné podpěry, nejsou kryty zárukou VDL Hapro.

Poruchy způsobené chybami při montáži a nebo instalaci, nesprávným používáním, poškozením způsobeným bleskem a neoriginálními díly jsou vyloučeny ze záruky Hapro. Před uplatněním záruky pečlivě zkontrolujte, zda bylo zařízení správně nainstalováno. V případě neoprávněného nároku vám budou účtovány náklady na servis.

## Odstraňování závad

Pokud se u tohoto zařízení vyskytnou problémy a vy je nedokážete vyřešit pomocí níže uvedených informací, obraťte se na nejbližšího prodejce Hapro.

Problém	Řešení
Zařízení se nespustí.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.
	Může být výpadek elektřiny. Zkontrolujte, zda napájení funguje, připojením jiného zařízení.
Špatný výsledek	Vzdálenost mezi lampami a vaším obličejem je větší než předepsaná.
	Když byly lampy používány po dlouhou dobu, jejich výkon se sníží. Tento efekt se stává znatelným až po několika letech. Tento problém můžete vyřešit nastavením mírně delší doby sezení nebo výměnou lamp.

## Výrobce

VDL Hapro b.v.  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands  
www.hapro.com

## Identifikace produktu

Seecret C25

Tento dokument je platný pro všechny výše uvedené typy vyrobené od 01.01.2012.

## Prostředky shody

Výrobky jsou v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského společenství a směrnicí o nízkém napětí 2006/95/EC Evropského společenství.

## Testování, elektrostatická kompatibilita

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 55014-1:2006+A1:2009,  
+A2:2011; EN 61000-3-2:2006+A1:2009, +A3:2009;  
EN 61000-3-3:2008; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:2009;  
EN 61000-4-3:2006+A1:2008, +A2:2010;  
EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2006;  
EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010

## Testování, směrnice o nízkém napětí

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 60335-1:2012/C11:2014  
EN 60335-1:2012/A11:2014  
EN 60335-2-27:2014

## Zástupce

Jméno: D.C. van de Linde  
Funkce: Ředitel  
Datum: 01/01/2012

Podpis



VDL Hapro



## Manufacturer

VDL Hapro b.v.  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands  
www.hapro.com

## Identifikace produktu

Secret C25

Tento dokument je platný pro všechny výše uvedené typy vyrobené od 01.01.2012.

## Prostředky shody

Výrobky jsou v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského společenství a směrnicí o nízkém napětí 2006/95/EC Evropského společenství.

## Testování, elektrostatická kompatibilita

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 55014-1:2006+A1:2009,  
+A2:2011; EN 61000-3-2:2006+A1:2009, +A3:2009;  
EN 61000-3-3:2008; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:2009;  
EN 61000-4-3:2006+A1:2008, +A2:2010;  
EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2006;  
EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010

## Testování, směrnice o nízkém napětí

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 60335-1:2012/C11:2014  
EN 60335-1:2012/A11:2014  
EN 60335-2-27:2014

## Zástupce

Jméno: D.C. van de Linde  
Funkce: Ředitel  
Datum: 01/01/2012

Podpis



VDL Hapro





## Manufacturer

VDL Hapro b.v.  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands  
www.hapro.com

## Identifikace produktu

Secret C25

Tento dokument je platný pro všechny výše uvedené typy vyrobené od 01.01.2012.

## Prostředky shody

Výrobky jsou v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského společenství a směrnicí o nízkém napětí 2006/95/EC Evropského společenství.

## Testování, elektrostatická kompatibilita

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 61000-6-3:2007+A1: 2011; EN 55014-1:2006+A1:2009,  
+A2:2011; EN 61000-3-2:2006+A1:2009, +A3:2009;  
EN 61000-3-3:2008; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:2009;  
EN 61000-4-3:2006+A1:2008, +A2:2010;  
EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2006;  
EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010

## Testování, směrnice o nízkém napětí

Provedeno: VDL Hapro Laboratory  
Fleerbosseweg 33  
4420 AC Kapelle, The Netherlands

Použité normy: EN 60335-1:2012/C11:2014  
EN 60335-1:2012/A11:2014  
EN 60335-2-27:2014

## Zástupce

Jméno: D.C. van de Linde  
Funkce: Ředitel  
Datum: 01/01/2012

Podpis




VDL Hapro





Dovozce a distributor pro  
Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a,  
140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175