


# M50 Minibike motorized

# TUNTURI®

## CARDIO FIT M50 MINIBIKE MOTORIZED

|    |                         |         |
|----|-------------------------|---------|
| GB | User manual             | 09 - 13 |
| DE | Benutzerhandbuch        | 14 - 19 |
| FR | Manuel de l'utilisateur | 20 - 25 |
| NL | Gebruikershandleiding   | 26 - 31 |
| IT | Manuale d'uso           | 32 - 37 |
| ES | Manual del usuario      | 38 - 42 |
| SV | Bruksanvisning          | 43 - 47 |
| SU | Käyttöohje              | 48 - 52 |

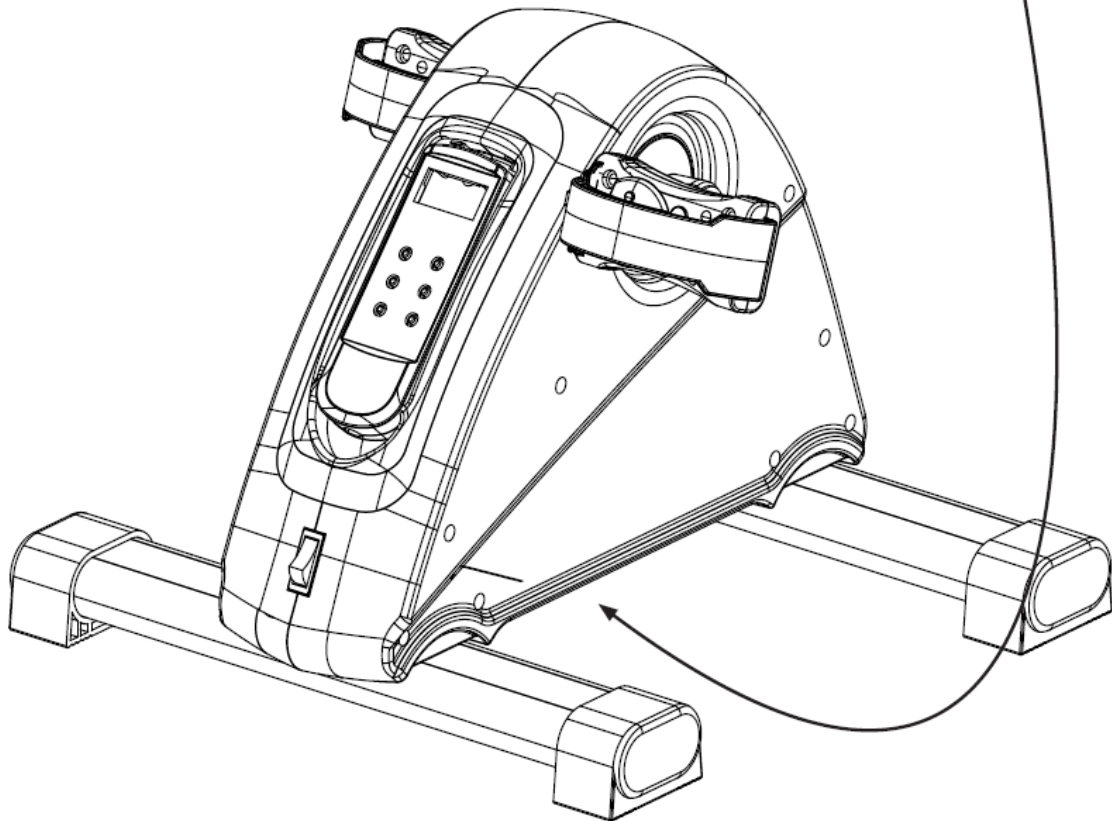

Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt, Huomio

- Please read this user manual carefully prior to using this product.
- Lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u dit product gaat gebruiken.
- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual de usuario.
- Läs den här användarhandboken noggrant före användning av den här produkten.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.



[www.tunturi.com](http://www.tunturi.com)

FEEL BETTER EVERY DAY

# M50 Minibike motorized

# M50 Minibike motorized

M50 Minibike motorized 




3

3

# M50 Minibike motorized

 M50 Minibike motorized

**B**

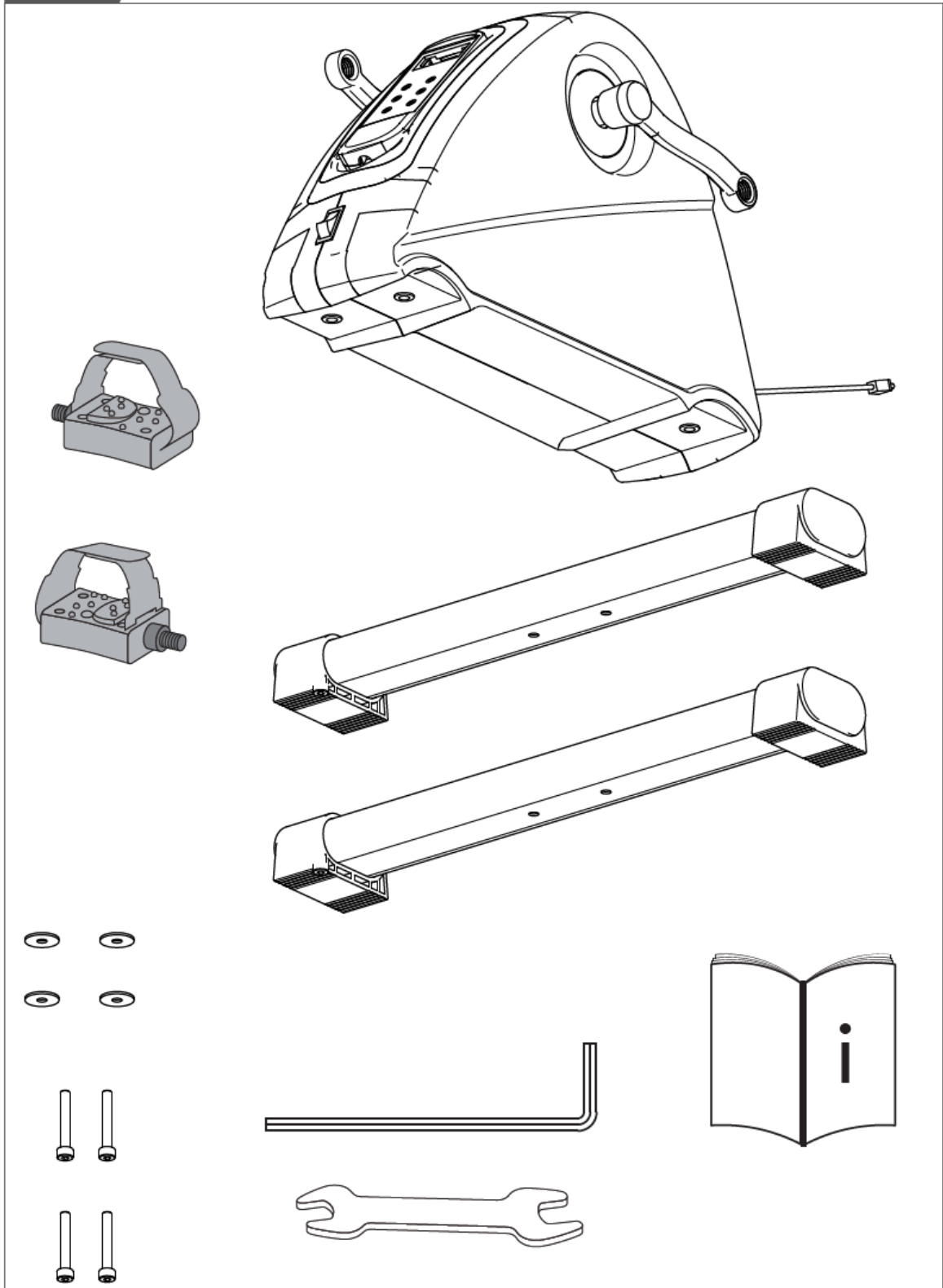

**TUNTURI®**


4

4

**TUNTURI®**

# M50 Minibike motorized

D-1

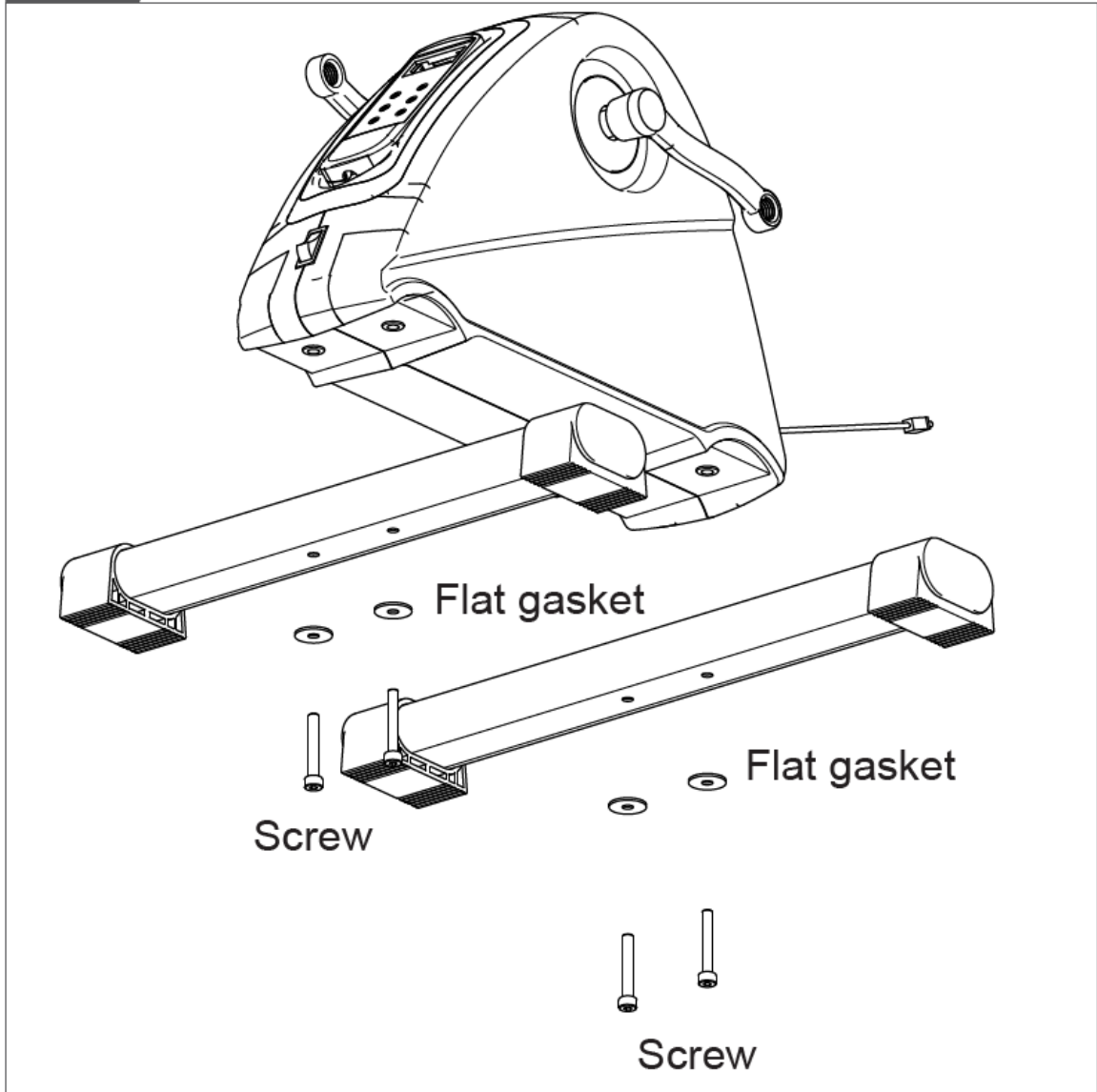

5




5

# M50 Minibike motorized



## M50 Minibike motorized

D-2A

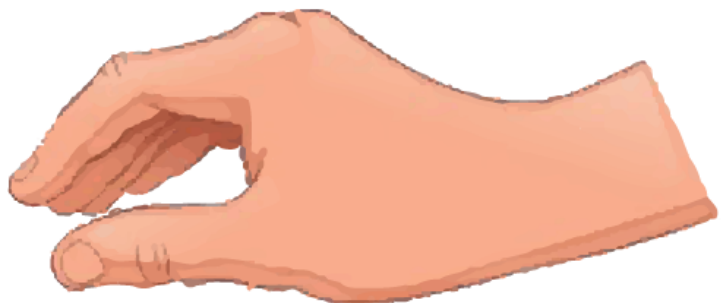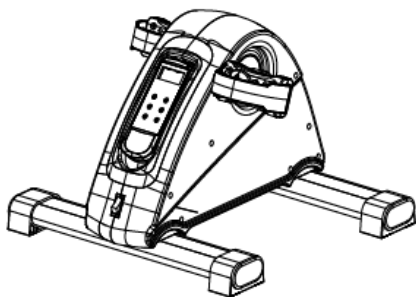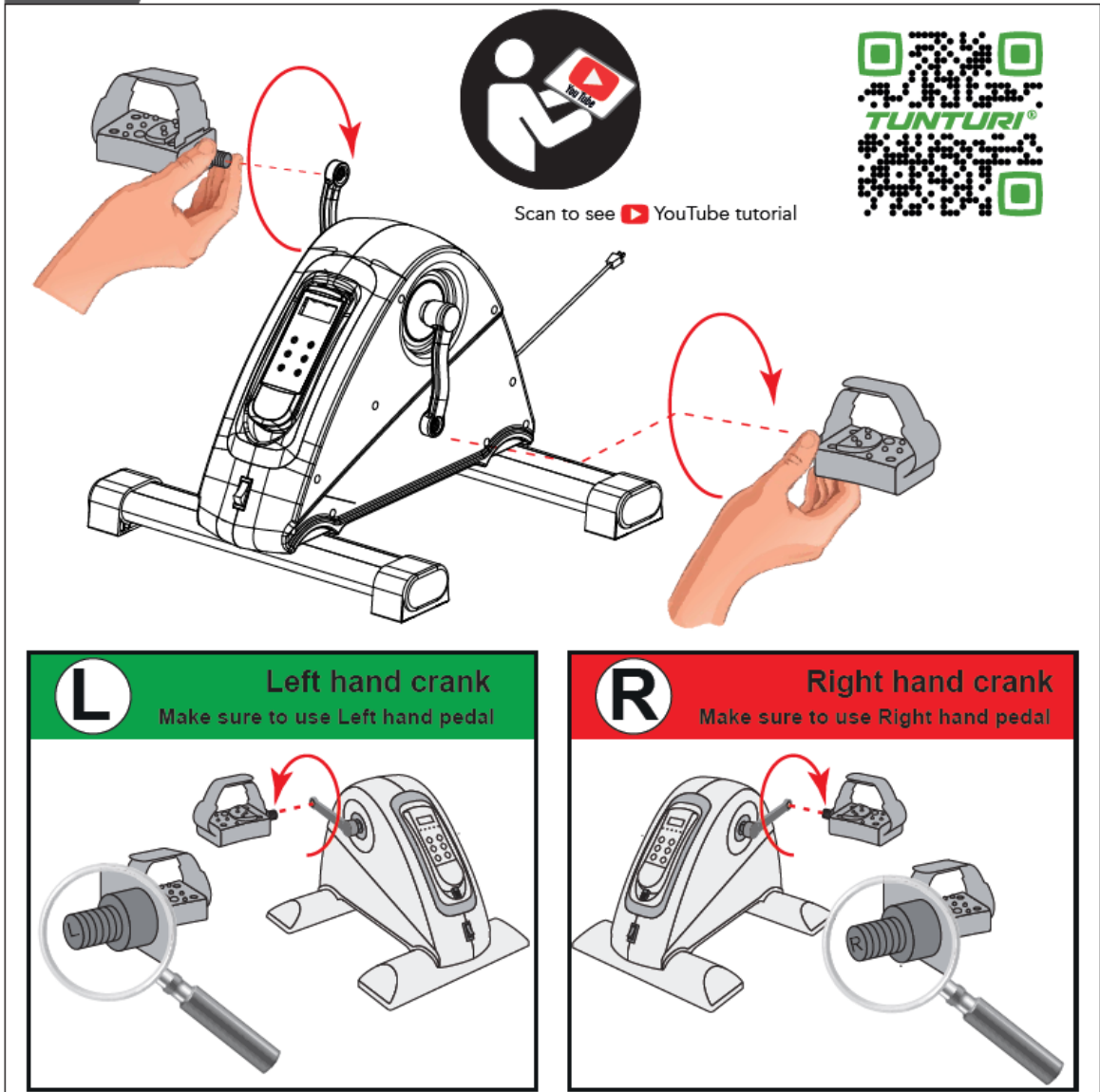

TUNTURI®

6


6

TUNTURI®

# M50 Minibike motorized

## M50 Minibike motorized

**D-2B**

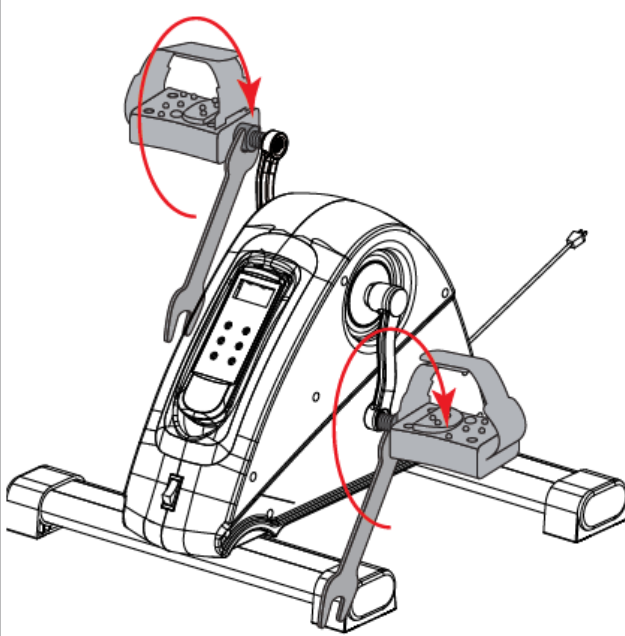


Scan to see  YouTube tutorial

**L**

**Left hand crank**




Make sure to use Left hand pedal

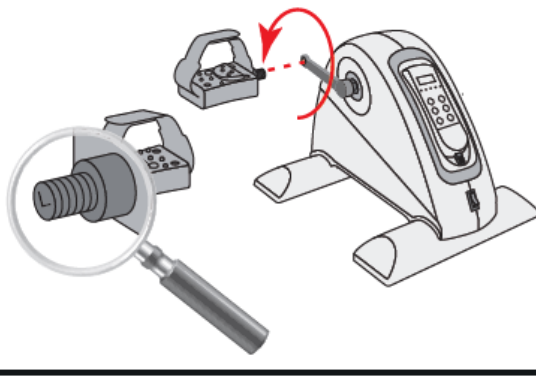

**R**

**Right hand crank**


Make sure to use Right hand pedal

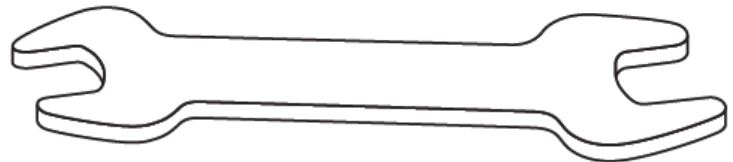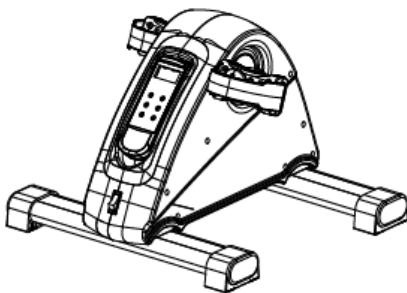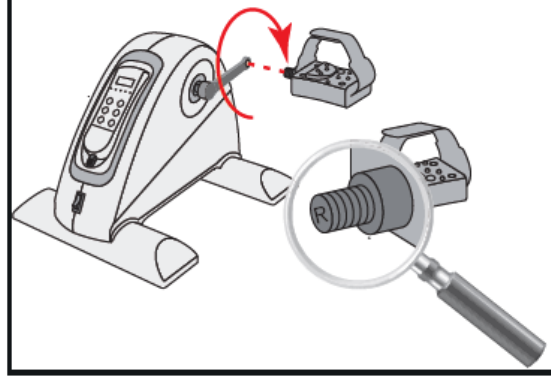

# M50 Minibike motorized

## M50 Minibike motorized

E-1

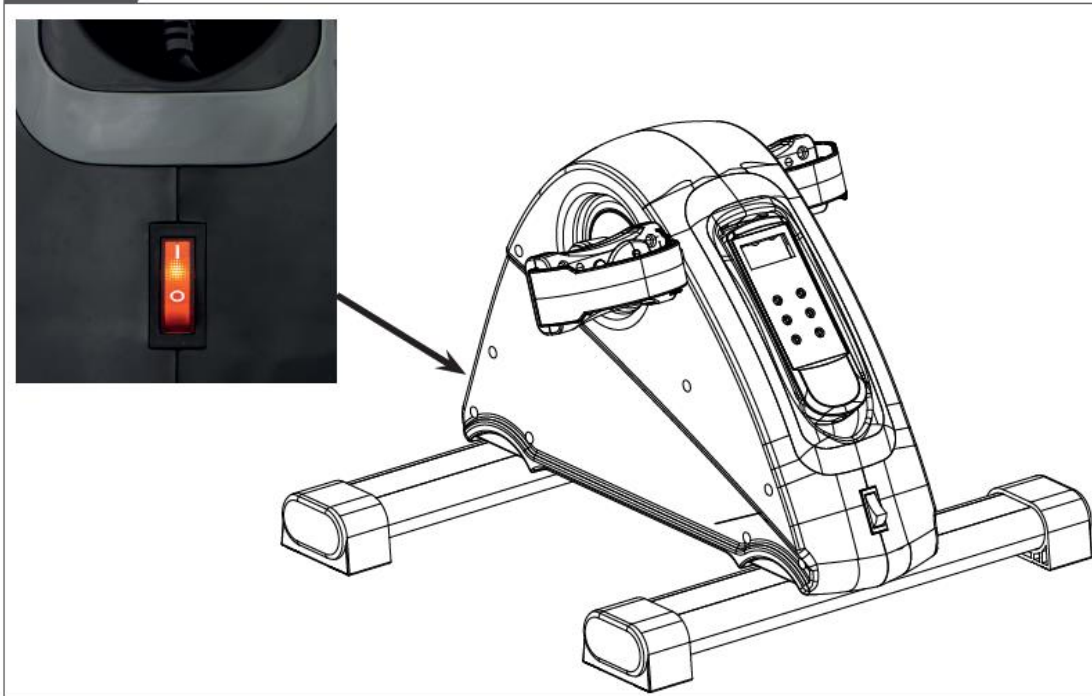

E-2



**TUNTURI**®

8

**TUNTURI**®

8



# M50 Minibike motorized

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Obsah                                |    |
| Vítejte .....                        | 9  |
| Bezpečnostní varování .....          | 9  |
| Elektrická bezpečnost.....           | 10 |
| Montážní návod.....                  | 10 |
| Popisný obrázek A.....               | 10 |
| Popis obrázku B.....                 | 10 |
| Popisný obrázek D.....               | 10 |
| Dodatečné montážní informace:.....   | 10 |
| Další informace .....                | 11 |
| Použití.....                         | 11 |
| Vyjmutí ovladače .....               | 11 |
| Uložení ovladače .....               | 11 |
| Použití bez podpory motoru .....     | 11 |
| Hlavní vypínač (obr. E-1).....       | 11 |
| Ovladač (obr. E-2).....              | 11 |
| Vysvětlení položek displeje .....    | 12 |
| Tlačítka.....                        | 12 |
| Programy .....                       | 13 |
| Manuální režim.....                  | 13 |
| Přednastavené programy (P1~P5) ..... | 13 |
| Čištění a údržba.....                | 13 |
| Závady a poruchy .....               | 14 |
| Doprava a skladování .....           | 14 |
| Záruka.....                          | 14 |
| Technická data.....                  | 15 |

## Vítejte

Vítejte ve světě Tunturi! Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení Tunturi. Tunturi nabízí širokou škálu domácího fitness vybavení, včetně crossových trenažérů, běžeckých pásů, rotopedů, vesel, posilovacích lavic a posilovacích věží. Vybavení Tunturi je vhodné pro celou rodinu, bez ohledu na to, na jaké kondici. Pro více informací navštivte naše webové stránky [www.tunturi.com](http://www.tunturi.com).

### Důležité bezpečnostní pokyny

Tento manuál je prosím nezbytnou součástí vašeho tréninkového vybavení, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu, než začnete používat zařízení.

Vždy je třeba dodržovat následující opatření:

## Bezpečnostní varování

### ⚠ VAROVÁNÍ

• Přečtěte si bezpečnostní varování a pokyny. Nenásledování bezpečnostních varování a pokynů může způsobit zranění nebo poškození zařízení. Dodržujte bezpečnostní upozornění a pokyny pro budoucí použití.

### ⚠ VAROVÁNÍ

• Systémy monitorování srdeční frekvence mohou být nepřesné.  
• Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Jestli cítíte unaveně okamžitě přestaňte cvičit.

- Zařízení je vhodné pouze pro domácí použití. Vybavení není vhodné pro komerční použití.

- Max. použití je omezeno na 2 hodiny denně.

- Používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s tělesným, smyslovým, mentálním nebo motorickým postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí může způsobit nebezpečí. Osoby odpovědné za jejich bezpečnost musí dávat výslovné pokyny nebo dohlížet na používání zařízení.

- Před zahájením tréninku se poraďte s lékařem, aby zkontroloval váš zdravotní stav.

- Jestliže zaznamenáte nevolnost, závrať nebo jiné abnormální příznaky, okamžitě přerušete cvičení a poraďte se s lékařem.

- Abyste se vyhnuli svalové bolesti a napětí, začněte každý trénink zahřátím a dokončete každý trénink zklidněním. Nezapomeňte se protáhnout na konci tréninku.

- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití. Vybavení není vhodné pro venkovní použití.

- Zařízení používejte pouze v prostředí s dostatečnou ventilací. Nepoužívejte zařízení v prostředí s průvanem, aby nedošlo k nachlazení.

- Zařízení používejte pouze v prostředí s okolní průměrnou teplotou mezi 10°C a 35°C. Skladujte zařízení pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 5°C a 45°C.

- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí. Vlhkost vzduchu nesmí být nikdy vyšší než 80 %.

- Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.

# M50 Minibike motorized

- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Pokud část je poškozená nebo vadná, kontaktujte svého prodejce.
- Udržujte ruce, nohy a další části těla mimo pohyblivé díly.
- Udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Noste vhodné oblečení a obuv.
- Udržujte oblečení, šperky a jiné předměty mimo pohyblivé díly.
- Ujistěte se, že zařízení používá vždy pouze jedna osoba. Zařízení nesmí používat osoby vážící více než 110 kg (240 liber).
- Neotevírejte zařízení bez konzultace s prodejcem.

## **Elektrická bezpečnost**

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné jako napětí na typovém štítku zařízení.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Udržujte síťový kabel mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.
- Neměňte ani neupravujte síťový kabel ani síťovou zástrčku.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná. Pokud jsou síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozené nebo vadné, kontaktujte svého prodejce.
- Vždy úplně odviňte síťový kabel.
- Neved'te síťový kabel pod zařízením. Neukládejte síťový kabel pod koberec. Nepokládejte žádné předměty na síťový kabel.
- Ujistěte se, že síťový kabel nevisí přes okraj stolu.
- Ujistěte se, že síťový kabel nemůže být náhodně zachycen popř. se o něj nedá zakopnout.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je síťová zástrčka zasunutá do nástěnné zásuvky.
- Při vytahování zástrčky ze zdi netahejte za síťový kabel.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, když zařízení není používáno, před montáží nebo demontáží a před čištěním a údržbou.

## **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Nikdy nepoužívejte vodu nebo jinou kapalinu přímo na nebo v blízkosti zařízení, ale pouze pomocí vlhkého hadříku, pokud je to nutné vyčistíte stroj.
- Přímé použití kapaliny je škodlivé pro součásti zařízení a může způsobit úraz elektrickým

proudem způsobený zkratem. To může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

## **Montážní návod**

### **Popisný obrázek A**

Obrázek ukazuje, jak bude trenažér vypadat po dokončení montáže. Můžete to použít jako referenci během sestavování, ale postupujte podle montážních kroků vždy ve správném pořadí, jak je znázorněno v ilustracích.

### **Popis obrázku B**

Obrázek ukazuje, jaké součásti a díly byste měli najít při vybalování produktu.

### **POZNÁMKA!**

- Malé díly lze schovat/zabalit do dutých prostorů. Ochrana produktu polystyrenem.
- Pokud některá část chybí, kontaktujte svého prodejce.

### **Popisný obrázek D**

Obrázky ukazují, jak ve správném následujícím pořadí postupovat, abyste sestavili svůj stroj.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Sestavte zařízení v daném pořadí.
- Přenášejte a přemísťujte zařízení alespoň ve dvou osobách.

### **⚠ POZOR**

- Umístěte zařízení na pevný, rovný povrch.
- Umístěte zařízení na ochrannou základnu, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy.
- Kolem zařízení ponechejte alespoň 100 cm volného prostoru.
- Podívejte se na obrázky pro správnou montáž zařízení.

## **Dodatečné montážní informace:**

### **D2 Jak správně instalovat pedály.**

#### **POZNÁMKA!**

- Pravá a levá strana se určuje z perspektivy cvičebních pozice (tedy z úhlu používání stroje).

#### **Pravý pedál**

- Najděte značku „R“ nebo „L“ na ose pedálu
- Nasad'te pravý pedál „R“ do pravé kliky (R).
  - Nejprve rukou otočte osou pedálu ve směru hodinových ručiček.
  - Pomocí klíče plně utáhněte pedál.

# M50 Minibike motorized

## Levý pedál

- Nasaďte levý pedál „L“ do levé kliky.
- Nejprve rukou otočte osou pedálu proti směru hodinových ručiček.
- Pomocí klíče plně utáhněte pedál.



Kliknutím zobrazíte naše podpůrné video na YouTube

<https://youtu.be/Devel2ZhCAc>

## POZNÁMKA!

- Po dokončení montáže produktu uschovejte nástroje dodané s tímto produktem pro budoucí servisní účely.

## Další informace

### Likvidace obalů

Vládní směrnice požadují, abychom snížili množství odpadního materiálu likvidovaného na skládkách. Žádáme vás proto, abyste veškerý obalový odpad zodpovědně likvidovali ve veřejných recyklačních střediscích.

### Likvidace na konci životnosti

My v Tunturi doufáme, že si užijete mnoho let příjemného používání svého fitness zařízení. Přijde však čas, kdy váš fitness trenažér doslouží. Podle Evropské legislativy WEEE jste odpovědní za správnou likvidaci vašeho fitness zařízení do uznávaného veřejného sběrného zařízení.

## Použití

### Vyjmutí ovladače

Ovladač zařízení lze vyjmout z úložného prostoru a držet jej v rukou během cvičení, aby bylo možné během cvičení pro vaše pohodlí provádět změny.

- Zvedněte špičkou prstu část ve spodní části ovladače.
- Opatrně vytáhněte ovladač, který zůstane spojený se zkrouceným telefonním drátem se zařízením. (délka kabelu ± 1,2 m).
- Ovladač lze držet v rukou a použít pro úpravy parametrů během tréninku.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte zachycení zkrouceného telefonního kabelu pohyblivými částmi zařízení během cvičení.

### Uložení ovladače

Po ukončení tréninku se doporučuje ovladač znovu uložit

- Plynulým pohybem vraťte ovladač zpět k úložnému prostoru zařízení, nejprve orientujte kabelový konec ovladače.
- Drát se znovu navine a zatáhne zpět do úložného prostoru, může být potřeba nějaké vedení.
- Zacykněte ovladač zpět na místo, abyste zajistili, že zůstane na svém místě.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Ovladač by se měl snadno vejít do úložného prostoru bez větší námahy. Je-li zapotřebí příliš velkého úsilí, zkontrolujte, zda je zkroucený telefonní kabel správně uložen a zda nebrání ovladači v uložení do úložného prostoru.

### Použití bez podpory motoru

Zařízení lze používat bez nebezpečí vnitřního poškození volně. Vyžaduje, aby byl hlavní vypínač v režimu vypnuto, což znamená, že není k dispozici zobrazení rychlosti ani podpora pohybu.

Přirozený odpor pohyblivých částí uvnitř stroje nelze změnit ani nastavit na jinou úroveň.

### Hlavní vypínač (obr. E-1)

Zařízení je vybaveno hlavním vypínačem pro úplné vypnutí zařízení.

#### Pro spuštění zařízení:

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy zapnuto.

#### Vypnutí zařízení:

- Přepněte hlavní vypínač do polohy vypnuto.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Ovladač (obr. E-2)

### ⚠ POZOR

- Udržujte ovladač mimo přímé sluneční světlo.
- Vysušte povrch ovladače, když je pokrytý kapkami potu.
- Neopírejte se o ovladač.

# M50 Minibike motorized

- Tlačítka ovladače se dotýkejte pouze špičkou prstu. Ujistěte se, že se vaše nehty nebo ostré předměty nedotýkají displeje.

## **!!POZNÁMKA**

- Počítač se nepřepne do pohotovostního režimu, ale zůstane v zapnutém režimu.
- Pokud stroj nepoužíváte, přepněte jej do režimu „Vypnuto“.

## **Vysvětlení položek displeje**

### **Scan**

- Automaticky skenovat zobrazení parametrů pro: Rychlost, Čas, Vzdálenost. & Cal.
- Každé zobrazení bude ukázáno na 4 sekundy.
- Kontrolka skenování se rozsvítí, když je funkce skenování aktivní.

### **Rychlost**

- Zobrazuje rychlost v úrovni nastavení 1~12.
- LED Speed se rozsvítí, když je zobrazen parametr rychlosti.

### **Čas**

- Zobrazuje čas běhu v režimu cvičení.
- Zobrazuje cílový čas v režimu programování. Jednotky parametrů zobrazení: 00:00 Minuty: Sekundy.
- LED Time se rozsvítí, když je zobrazen parametr Time.

### **Dist. (Vzdálenost)**

- Zobrazuje zbývající čas cvičení v režimu odpočítávání. Jednotky parametrů zobrazení: 0,000 KM / Metry.
- Dist. LED se rozsvítí, když je zobrazen parametr Vzdálenost.

### **CAL. (kalorie)**

- Zobrazuje spotřebované kalorie v režimu cvičení. Jednotky parametrů zobrazení: 000,0 kalorií.
- Cal. LED se rozsvítí, když je zobrazen parametr Calorie.

## **!!POZNÁMKA**

- Tyto údaje jsou hrubým vodítkem pro srovnání různých cvičení, která nelze použít při lékařském ošetření.

## **Tlačítka**

### **Start/Stop**

- Začne vybraný trénink v režimu zastavení.
- Zastaví aktivní cvičení, když jste v režimu cvičení.

### **MODE (Režim)**

- Potvrdí programový režim v klidovém režimu.
- Potvrdí nastavení pro vstup do dalšího kroku v programovacím režimu.
- Přepíná režimy zobrazení, když jste v režimu cvičení.

### **Čas**

- Nastavte čas pro cvičení (1 ~ 15 min. ± 1 minuta).
- Jedním stisknutím prodloužíte jednu minutu, stisknutím a podržením zadávání zrychlíte.

## **!!POZNÁMKA**

- V programovacím režimu může čas při každém stisknutí tlačítka načítat pouze jednu minutu. Po dosažení 15 minut začne nastavení znovu na 1 minutě, aby se znovu opakoval cyklus počítání.

### **Reverse**

- Nastavuje směr otáčení pedálu při pohybu dozadu, když jste v poloze vpřed.
- Nastavuje směr otáčení pedálu při pohybu vpřed, když jste v nastavení vzad.
- Stisknutím tlačítka „Reverse“ v provozním režimu se zařízení plynule zastaví, držte stop po dobu asi 2 sekund, než může motor aktivovat zpětný režim.

## **!!POZNÁMKA**

- Když je zařízení v režimu zpětného chodu, všechna tlačítka nefungují, dokud se stroj znovu neuvede do pohybu.

### **Rychlost +/- rychlost -**

- Stiskněte „Speed +“ pro zvýšení rychlosti pro požadovaný režim podpory rychlosti motoru.
- Stiskněte „Speed -“ pro snížení rychlosti pro požadovaný režim podpory rychlosti motoru.
- Jedním stisknutím zvýšíte/snížíte jednu úroveň, stisknutím a podržením zadávání zrychlíte.

# M50 Minibike motorized

- Tabulka níže znázorňuje každou úroveň představující počáteční otáčky (otáčky za minutu):

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Speed | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| RPM   | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 80 |

## Programy

### Manuální režim

Zařízení má manuální režim, kde si uživatel může kdykoli zvolit a upravit rychlostní stupeň. Chcete-li vybrat tento režim:

- Stisknutím tlačítka „Mode“ otevřete programovací režim, na displeji se zobrazí P1.
- Tiskněte tlačítko „Mode“, dokud se nezobrazí „-.-.-.“ jako manuální režim.
- Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ zahájíte cvičení.
- Stiskněte tlačítka „Speed +/-“ pro nastavení požadovaného režimu podpory rychlosti. Výchozí nastavení rychlosti je 1.
- Stiskněte tlačítko „Time“ pro nastavení požadovaného času cvičení v rozsahu 1~15 minut. Výchozí nastavení času cvičení je 10 minut.
- Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ zahájíte cvičení.
- Stiskněte tlačítko „Speed +/-“, když si přejete nastavit rychlost podpory vždy na požadovanou rychlost.
- Vždy stiskněte tlačítko „Reverse“, jak si přejete nastavit směr pohybu podpory.
- Když dosáhnete předem nastaveného času cvičení, stroj se plynule zastaví.

### Přednastavené programy (P1~P5)

Zařízení má 5 přednastavených programů s různými profily. Každý profil má přednastavený profil ve variantách rychlosti a směru.

- Tabulka níže zobrazuje každý předem naprogramovaný profil.

Každý segment bude trvat 30 sekund a pokračuje v cyklování, dokud doba cvičení nedosáhne konce a stroj se plynule nezastaví.

|    | Direction | ↺ | ↺  | ↺ | ↺  | ↺  | ↺ | ↺  | ↺ | ↺  |    |
|----|-----------|---|----|---|----|----|---|----|---|----|----|
| P1 | Speed     | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  |
| P2 | Speed     | 2 | 3  | 4 | 5  | 6  | 2 | 3  | 4 | 5  | 6  |
| P3 | Speed     | 3 | 5  | 7 | 9  | 11 | 3 | 5  | 7 | 9  | 11 |
| P4 | Speed     | 4 | 6  | 8 | 10 | 12 | 4 | 6  | 8 | 10 | 12 |
| P5 | Speed     | 5 | 10 | 5 | 10 | -- | 5 | 10 | 5 | 10 | -  |

### Chcete-li vybrat preferovaný profil:

- Stisknutím tlačítka „Mode“ otevřete programovací režim, na displeji se zobrazí P1.
  - Stiskněte tlačítko „Mode“, dokud se nezobrazí požadovaný režim profilu.
  - Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ zahájíte cvičení.
  - Stiskněte tlačítko „Time“ pro nastavení požadovaného času cvičení v rozsahu 1~15 minut. Výchozí nastavení času cvičení je 10 minut.
  - Stiskněte tlačítko „Úroveň +/-“, jak si přejete nastavit rychlost podpory vždy na požadovanou rychlost.
  - Vždy stiskněte tlačítko „Reverse“, jak si přejete nastavit směr pohybu podpory.
- !!POZNÁMKA**
- Při změně rychlosti nebo směru jízdy, když jste v předprogramovaném profilu, se změna uplatní pouze v aktivním segmentu, ve kterém se nacházíte, a při přechodu na další segment profilu se bude držet přednastaveného profilu.
  - Když dosáhnete předem nastaveného času cvičení, stroj se plynule zastaví.

## Čištění a údržba

Zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu. Zařízení nevyžaduje kalibraci, pokud je sestaveno, používáno a udržováno podle pokynů.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním a údržbou vyjměte adaptér.
- K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla.
- Po každém použití očistěte zařízení měkkým savým hadříkem.

# M50 Minibike motorized

- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.

## Závady a poruchy

I přes průběžnou kontrolu kvality se mohou na zařízení vyskytnout závady a poruchy způsobené jednotlivými díly. Ve většině případů bude stačit vyměnit vadný díl.

- Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce.
- Poskytněte prodejci číslo modelu a sériové číslo zařízení. Uveďte povahu problému, podmínky použití a datum nákupu.

## **Odstraňování problémů:**

I přes neustálou kontrolu kvality se mohou na zařízení vyskytnout závady a poruchy způsobené jednotlivými součástmi. Ve většině případů není nutné brát do opravy celé zařízení, protože obvykle postačí vyměnit vadný díl.

Pokud zařízení během používání nefunguje správně, okamžitě kontaktujte svého prodejce Tunturi. Vždy uveďte model a sériové číslo vašeho zařízení. Uveďte také povahu problému, podmínky použití a datum nákupu.

Pokud požadujete náhradní díly, vždy uveďte model, sériové číslo vašeho zařízení a číslo náhradního dílu, který potřebujete.

Seznam náhradních dílů je na zadní straně tohoto návodu. Používejte pouze náhradní díly uvedené v seznamu náhradních dílů.

## **Chybové kódy**

Pokud se na displeji zobrazí chybový kód (označený „E“ + číslo), restartujte zařízení a zkontrolujte, zda se na displeji stále zobrazuje chybový kód. Pokud se na displeji stále zobrazuje chybový kód, okamžitě kontaktujte prodejce.

## Doprava a skladování

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

- Přenášejte a přemísťujte zařízení opatrně.
- Přesuňte zařízení a opatrně jej položte.
- Umístěte zařízení na ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy.
- Přesouvajte a zvedněte zařízení opatrně po nerovném povrchu.
- Nepřemísťujte zařízení uchopením pedálů, ale použijte přiřazenou rukojeť na horní straně krytu.
- Zařízení skladujte na suchém místě s co nejmenšími výkyvy teploty.

## Záruka

### **Záruka Tunturi**

#### **Záruční podmínky**

Spotřebitel má nárok na příslušná zákonná práva uvedená v národní legislativě týkající se obchodu se spotřebním zbožím. Tato záruka neomezuje tato práva. Záruka kupujícího je platná

pouze v případě, že je položka používána v prostředí schváleném společností Tunturi New Fitness BV a je udržována podle pokynů pro toto konkrétní zařízení. Schválené prostředí a pokyny k údržbě specifické pro produkt jsou uvedeny v „uživatelské příručce“ produktu. „Uživatelskou příručku“ si můžete stáhnout z našich webových stránek.

<http://manuals.tunturi.com>

#### **Záruční podmínky**

Záruční podmínky začínají běžet od data nákupu.

Záruční podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit, proto se prosím obraťte na svého místního prodejce ohledně záručních podmínek.

#### **Záruční krytí**

Společnost Tunturi New Fitness BV ani distributor Tunturi za žádných okolností nenesou odpovědnost na základě této záruky ani jinak za žádné zvláštní, nepřímé, sekundární nebo následné škody jakékoli povahy vyplývající z jakéhokoli použití nebo neschopnosti používat toto zařízení.

#### **Omezení záruky**

Tato záruka se vztahuje na výrobní vady fitness zařízení, jak bylo původně zabaleno společností Tunturi New Fitness BV. Záruka platí pouze za podmínek normálního, doporučeného použití produktu, jak je popsáno v uživatelské příručce, a za předpokladu, že byly dodrženy pokyny Tunturi New Fitness BV pro instalaci, údržbu a použití. Povinnosti Tunturi New Fitness BV ani Tunturi distributorů se nevztahují na vady způsobené důvody, které nemohou ovlivnit. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a je platná pouze v zemích, kde má Tunturi New Fitness BV autorizovaného dovozce. Záruka se nevztahuje na fitness vybavení nebo komponenty, které byly upraveny bez souhlasu Tunturi New Fitness BV. Závady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním, zneužitím, korozí

# M50 Minibike motorized

nebo poškozením vzniklým během nakládání nebo přepravy nejsou kryty. Záruka se nevztahuje na zvuky nebo zvuky vydávané během používání, pokud podstatně nebrání použití zařízení a pokud nejsou způsobeny závadou na zařízení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neprováděním pravidelné údržby, jak je uvedeno v uživatelské příručce. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé používáním a skladováním v nevhodném prostředí popsaném v návodu k obsluze, které by mělo být uvnitř, suché, bez prachu a písku a v teplotním rozsahu +15 °C až +35 °C. Záruka se nevztahuje na činnosti údržby, jako je např. čištění, mazání a běžné úpravy dílů, ani instalační postupy, které mohou zákazníci provést sami, jako je výměna nekomplikovaných měřičů, pedálů a jiných podobných dílů vyžadující jakoukoliv demontáž/zpětnou montáž fitness zařízení. Záruční opravy prováděné jinými než autorizovanými společnostmi Tunturi zástupci nejsou kryty. Nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze zaniká záruka na produkt.

- Specifikace se mohou změnit bez dalšího upozornění.
- Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na našich webových stránkách.

## Technická data

| Parameter                             | Unit of measurement | Value     |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| Mains voltage                         | VAC                 | 210 ~ 240 |
| Mains frequency                       | HZ                  | 50 ~ 60   |
| Speed                                 | Levels              | 1 ~ 15    |
| Length                                | Cm                  | 42.0      |
| Width                                 | Cm                  | 40.0      |
| Height                                | Cm                  | 29.0      |
| Weight                                | Kg                  | 4.5       |
| Heart rate measurement available via: | hand-grip contact   | No        |
|                                       | 5.3~ 5.4 Khz.       | No        |
|                                       | Bluetooth (BLE)     | No        |
|                                       | ANT+                | No        |

### **Prohlášení výrobce**

Tunturi New Fitness BV prohlašuje, že výrobek je ve shodě s následující normy a směrnice: EN 957 (HA), 2014/30/EU. Výrobek proto nese označení CE. 09-2023

Tunturi New Fitness BV  
Purmerweg 1  
1311 XE Almere  
Nizozemí

### **Zřeknutí se odpovědnosti**

© 2023 Tunturi New Fitness BV

Všechna práva vyhrazena.

- Produkt a návod se mohou změnit.

# M50 Minibike motorized

**TUNTURI**<sup>®</sup>



**FEEL BETTER EVERY DAY**

## TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1  
1311 XE Almere  
The Netherlands

P.O. Box 60001  
1320 AA Almere  
The Netherlands

info@tunturi.com  
www.tunturi.com

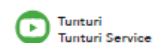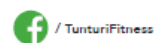

20240226-W

**TUNTURI**<sup>®</sup>